

Made  
in  
Germany




# ORTHÈSES PLANTAIRES & ACCESSOIRES

2020



NUMÉRO DE CLIENT À PORTÉE DE MAIN ?

---

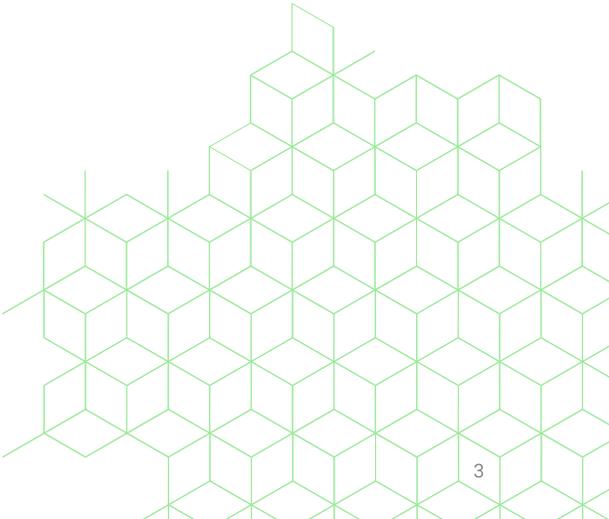





## PERPEDES

Perpedes accorde beaucoup d'importance aux personnes et à leur mobilité. Nos produits novateurs en orthopédie du pied, nos chaussures thérapeutiques et nos gammes d'orthèses pour les jambes contribuent à améliorer la mobilité et à promouvoir la santé. Ils améliorent le bien-être et la qualité de vie.

Notre approche réussie s'inscrit dans la synergie de l'artisanat et de la haute technologie. Nous possédons une équipe hautement qualifiée pleine de bonnes idées, qui vous soutiendra grâce à son concept de production tourné vers l'avenir.

Depuis 1923, nous travaillons en étroite collaboration avec des médecins et des spécialistes en orthopédie pour créer des produits et des matériaux qui définissent de nouveaux standards.

[www.perpedes.com](http://www.perpedes.com)



## À PROPOS DE PERPEDES

**«Les bonnes idées sont recherchées par des partenaires qui envisagent et prennent des mesures pratiques et économiques ; des partenaires capables de donner forme aux idées et de garantir un succès parfait.»**

Le nom Perpedes vient du latin «per pedes» et signifie «sur pied». Un nom approprié pour une entreprise spécialisée dans la santé des pieds. Après tout, nos pieds sont chargés de nous amener d'un point A à un point B et on ne leur accorde souvent que trop peu d'attention. Ils doivent être opérationnels et nous porter tout au long de la vie, si possible sans blessures ou autres problèmes. Les pieds sont néanmoins un sujet très complexe.

Il n'est pas rare que nous ayons de petites déformations ou blessures auxquelles nous ne prêtons pas grande attention, sans être conscients des

effets que cela peut avoir sur le reste du corps. Une douleur au dos, par exemple, peut venir d'une mauvaise façon de marcher, que nous ne remarquons même pas. Garantir des pieds en bonne santé et offrir le meilleur processus de guérison possible pour les blessures liées à la démarche humaine font partie intégrante de notre engagement global.

Le développement et la production de produits précurseurs en matière de technologie orthopédique et de technologie des chaussures orthopédiques sont au cœur de notre offre. La réalisation, la production et le traitement spécialisés de nos propres matériaux composites en fibres sont particulièrement intéressants. Une diversité exceptionnelle de produits et de matériaux, une compétence, un service et une qualité sans compromis sont à la base de notre succès continu jusqu'à aujourd'hui.



Perpedes Röck 2003  
Lenningen/Schopfloch



Perpedes GmbH 2019  
Lenningen/Schopfloch avec nouvelle salle



Perpedes GmbH 2020  
Kirchheim/Teck



Perpedes 2019  
Partizánske, Slovaquie



Perpedes Tecnoinsole, S.L. 2019  
Torrellano (Alicante), Espagne

## FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

En 1945, l'entreprise individuelle «Helmut Roeck» est fondée par le mécanicien orthopédiste Helmut Roeck à Kirchheim unter Teck, en Allemagne, dans le but de fournir des soins orthopédiques aux anciens combattants et civils handicapés. En 2014, le nom «Helmut Roeck GmbH » est changé en «Perpedes GmbH». Perpedes GmbH est une entreprise certifiée ISO 900:2015.

Aujourd'hui, Perpedes GmbH est une entreprise de taille moyenne dont le siège se trouve dans la Région métropolitaine de Stuttgart, en Allemagne, et qui possède des filiales en Slovaquie et en Espagne. L'entreprise compte, au total, 180 employés dans le monde. Nous sommes fiers de proposer au Canada, à partir de 2019, des solutions de traitement Perpedes fabriquées en Allemagne homologuées MDEL.

Stefan Prem  
PDG et propriétaire

# TABLE DES MATIÈRES

Service .....	9
<b>BON À SAVOIR .....</b>	<b>11</b>
Silhouette .....	12
Arche longitudinale/Silhouette 3D .....	14
Guide de sélection produits .....	16
Tableau de conversion .....	17
<b>ORTHÈSES PLANTAIRES .....</b>	<b>19</b>
ORTHÈSES PLANTAIRES AUTOPORTANTES .....	21
GAMME DAILY .....	23
Daily .....	24
Daily High Heel .....	25
Daily Rigidus .....	26
GAMME SOLEUTION .....	29
Soleution Support .....	30
Soleution Pro .....	31
Soleution Papillon .....	32
GAMME CALCA .....	35
Calca PRO X .....	36
Calca PRO X GREEN EDITION .....	37
Calca PRO X XL .....	38

<b>MATÉRIAUX .....</b>	<b>41</b>
REVÊTEMENTS SUPÉRIEURS .....	43
DryFeet lisse .....	44
DryFeet microperforée .....	45
COMBINAISONS POUR COUCHE SUPÉRIEURE .....	47
DryFeet+ .....	48
<b>ACCESSOIRES .....</b>	<b>51</b>
BALANCER - Module de talon .....	53
COUSSINETS .....	57
Forme de goutte .....	58
Forme anatomique .....	58
Conditions Générales & Conditions .....	60

# SERVICE



## ACADÉMIE

Perpedes Canada propose différents types de formations, y compris des webinaires en ligne. Bien sûr, nous serions aussi ravis de venir dans votre entreprise pour organiser un séminaire sur place ou un atelier utilisateurs à votre demande. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!

Rendez-nous visite sur YouTube! Rechercher Perpedes GmbH.



## INDIVIDUALITÉ

Nous accordons beaucoup d'importance à l'individualité. Nous sommes donc attentifs à vos souhaits et sommes disponibles pour recevoir vos demandes chez Perpedes 4U. Que vous vouliez ajouter une touche personnelle à une semelle intérieure ou ajouter une feuille de fibre composite spécialement conçue pour vous, nous sommes le partenaire compétent qui vous permettra de concrétiser vos idées. En outre, contactez-nous pour d'autres exigences en matière de taille.



## LOGISTIQUE

Nos orthèses plantaires brutes, nos matériaux de revêtement, nos articles en fibre composite et nos accessoires, qui réalisent des records de ventes, sont disponibles auprès de notre magasin canadien. Peu importe que vous ayez fait une commande pour votre siège ou pour une succursale. Nous faisons en sorte que tous vos articles arrivent à l'adresse souhaitée. Si vous avez besoin d'une livraison express, dites-le nous au moment de la commande pour que votre flux de travail ne soit pas interrompu.



## ACCESSIBILITÉ


Si vous avez une question, que vous voulez passer commande ou nous poser une question : notre boutique en ligne est toujours là pour vous, 24 h sur 24 et 7 j. sur 7. Nous sommes heureux d'être disponibles pour vous apporter conseil et assistance.

[www.perpedes.com](http://www.perpedes.com)  
[info@perpedes.com](mailto:info@perpedes.com)





## BON À SAVOIR

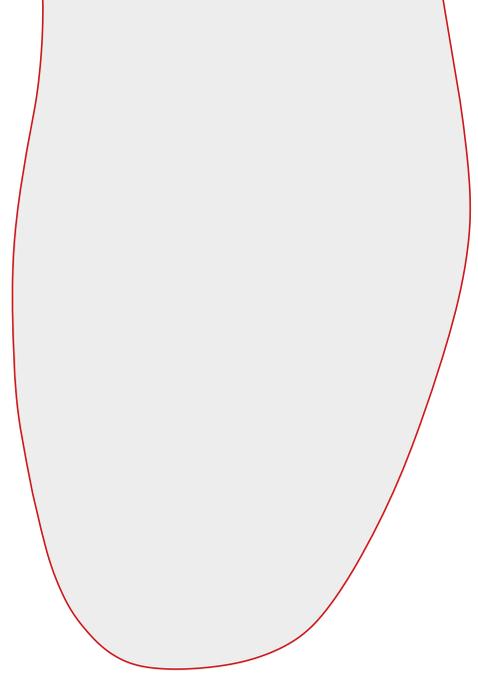

CARRÉE

Silhouette: 869



## SILHOUETTE

VARIABLE

Silhouette: 859

BUSINESS


Silhouette: 1048

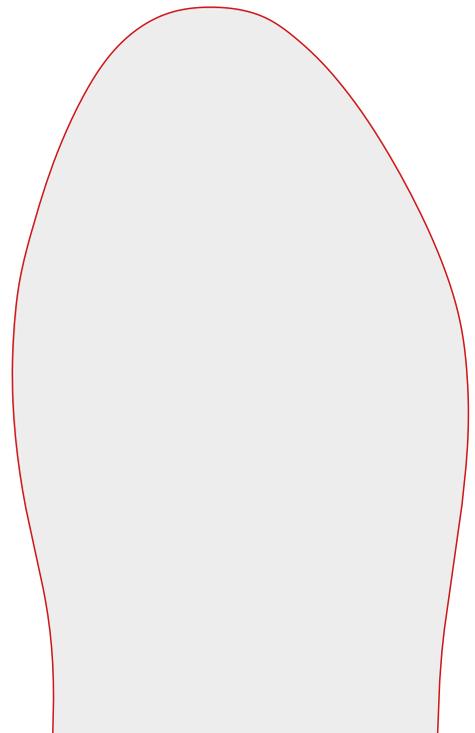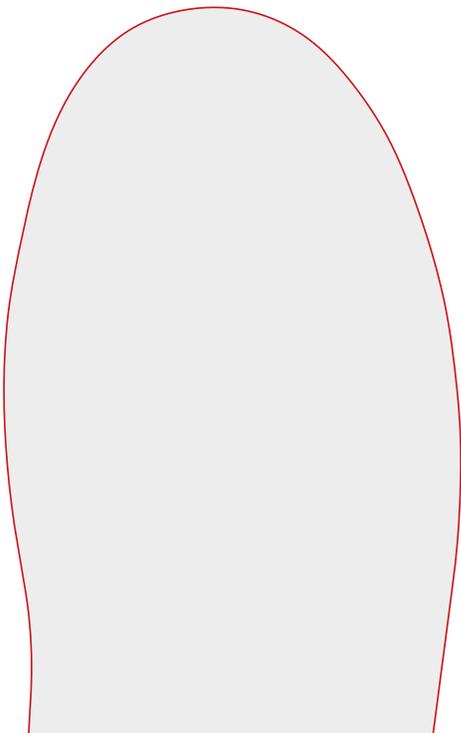





## ARCHE LONGITUDINALE/SILHOUETTE 3D

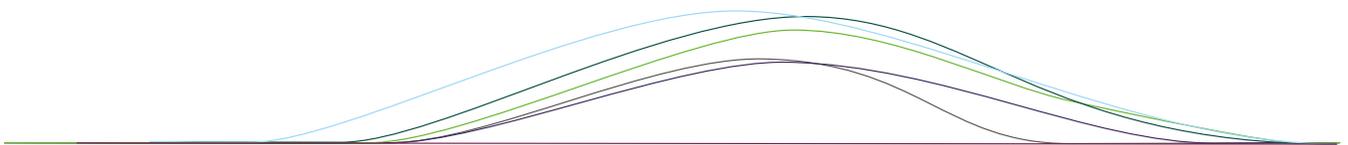

- ACRYLIQUE / F = plat
- SOLEUTION / SH = soutien élevé de la voûte latérale avec talon guidé
- CALCA II / R = soutien plus élevé de la voûte latérale avec talon guidé
- CALCA PRO X / PX = soutien modéré de la voûte latérale avec cavité du fascia plantaire dans la coquille
- DAILY HIGH HEEL / DH = soutien modéré de la voûte latérale, talon plat
- DAILY / DA = soutien modéré de la voûte latérale avec talon légèrement guidé


F = plat



SH = soutien élevé de la voûte latérale avec talon guidé



R = soutien plus élevé de la voûte latérale avec talon guidé

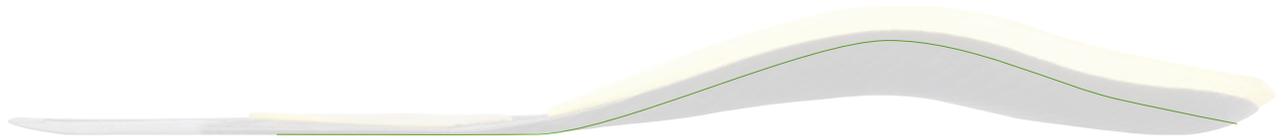

PX = soutien modéré de la voûte latérale avec cavité du fascia plantaire dans la coquille



DH = soutien modéré de la voûte latérale, talon plat



DA = soutien modéré de la voûte latérale avec talon légèrement guidé

# GUIDE DE SÉLECTION PRODUITS

SYMPTÔMES	MAUX	RECOMMANDATION DE PRODUIT*
		Primary Solution
<b>Douleurs de la voûte</b> <b>Sollicitations de la voûte</b>	Surpronation Syndrome du tunnel tarsien Tendinite d'Achille Syndrome cuboïde	DAILY (moyenne/étroite) DAILY HIGH HEEL SOLEUTION SUPPORT
<b>Douleurs du talon</b>	Fasciite plantaire Épine calcanéenne Pes cavus Bursite calcanéenne plantaire (ecchymose du talon) Epiphysite du calcanéum (maladie de Sever) Bursite rétro-calcanéenne Déformation de Haglund	CALCA PRO X CALCA PRO X XL
<b>Douleurs de l'avant-pied</b>	Métatarsalgie Neurome de Morton Atrophie du coussin adipeux	DAILY (moyenne/étroite) DAILY HIGH HEEL DAILY RIGIDUS (moyenne/étroite) SOLEUTION PAPILLON
<b>Cors aux pieds</b>	Hallux valgus	DAILY (moyenne/étroite) DAILY HIGH HEEL DAILY RIGIDUS (moyenne/étroite) SOLEUTION PAPILLON
<b>Arthrite</b>	Goutte Ostéoarthrite (OA) Arthrite rhumatoïde	DAILY (moyenne/étroite) DAILY RIGIDUS (moyenne/étroite) SOLEUTION PAPILLON CALCA PRO X SOLEUTION PRO
<b>Pied plat</b> (avec ou sans talon valgus)	Surpronation Pied plat flexible (non rigide)	DAILY (moyenne/étroite) DAILY HIGH HEEL SOLEUTION SUPPORT SOLEUTION PRO
<b>Douleurs du bas de la jambe</b>	Syndrome de stress tibial	DAILY (moyenne/étroite) DAILY HIGH HEEL SOLEUTION SUPPORT
<b>Grossesse</b> Douleurs de la voûte	Métatarsalgie Surpronation	DAILY (moyenne/étroite) DAILY HIGH HEEL SOLEUTION SUPPORT
Douleurs du talon	Fasciite plantaire	CALCA PRO X



DAILY  
DAILY RIGIDUS  
(moyenne/étroite)



CPX



CALCA PRO X XL



SOLEUTION  
SUPPORT  
PRO  
PAPILLON



DAILY  
HIGH HEEL



\*en fonction de la chaussure



TALON HAUT



ENTREPRISE DE LA FEMME



LES AFFAIRES DES HOMMES



DÉCONTRACTÉE



ATHLÉTIQUE



RANDONNÉE

La sélection de produits variera en fonction du degré d'activité, de l'âge, du poids et du type de chaussures.

Ce guide ne se substitue aucunement au conseil et à l'aide d'un professionnel médical qualifié.

# TABLEAU DE CONVERSION POUR LES TAILLES EU / US / UK

EUROPE	UK	US WOMEN	US MEN
EU 35	UK 3	US 4 <sup>1/2</sup>	US 3 <sup>1/2</sup>
EU 36	UK 3 <sup>1/2</sup>	US 5 <sup>1/2</sup>	US 4 <sup>1/2</sup>
EU 37	UK 4 <sup>1/2</sup>	US 6	US 5
EU 38	UK 5	US 7	US 6
EU 39	UK 6	US 7 <sup>1/2</sup>	US 7
EU 40	UK 6 <sup>1/2</sup>	US 8 <sup>1/2</sup>	US 7 <sup>1/2</sup>
EU 41	UK 7 <sup>1/2</sup>	US 9 <sup>1/2</sup>	US 8 <sup>1/2</sup>
EU 42	UK 8	US 10	US 9
EU 43	UK 9	US 11	US 10
EU 44	UK 10	US 11 <sup>1/2</sup>	US 10 <sup>1/2</sup>
EU 45	UK 10 <sup>1/2</sup>	US 12 <sup>1/2</sup>	US 11 <sup>1/2</sup>
EU 46	UK 11 <sup>1/2</sup>	US 13	US 12
EU 47	UK 2	US 14	US 13
EU 48	UK 13	US 15	US 14
EU 49	UK 14	US 15 <sup>1/2</sup>	US 14 <sup>1/2</sup>
EU 50	UK 14 <sup>1/2</sup>	US 16 <sup>1/2</sup>	US 15 <sup>1/2</sup>
EU 51	UK 15		US 16
EU 52	UK 16		US 17

Si la taille demandée n'est pas indiquée dans le tableau, veuillez commander la taille supérieure aux États-Unis.





# ORTHÈSES PLANTAIRES



# ORTHÈSES PLANTAIRES AUTOPORTANTES






## DAILY

La gamme DAILY est parfaitement adaptée à une utilisation dans différents types de chaussures avec espaces réduits. DAILY, DAILY HIGH HEEL et DAILY RIGIDUS sont vos compagnons idéaux pour le quotidien. Avec ses orthèses brutes extrêmement fines et légères, la gamme DAILY vous offre l'opportunité de fournir à vos clients des orthèses de pieds qui sont de haute qualité et qui sont même adaptées aux chaussures professionnelles. Deux largeurs de coquilles sont disponibles: étroite et medium. La pièce centrale de la gamme DAILY est la coquille orthopédique en fibre de verre et en matériau composite développée et produite par Perpedes elle-même. En raison de leurs propriétés thermoplastiques, les coquilles peuvent être personnalisées pour s'adapter au pied facilement et rapidement. Des matériaux de haute qualité qui répondent à des demandes élevées et qui peuvent être traités rapidement et facilement.



DAILY RIGIDUS

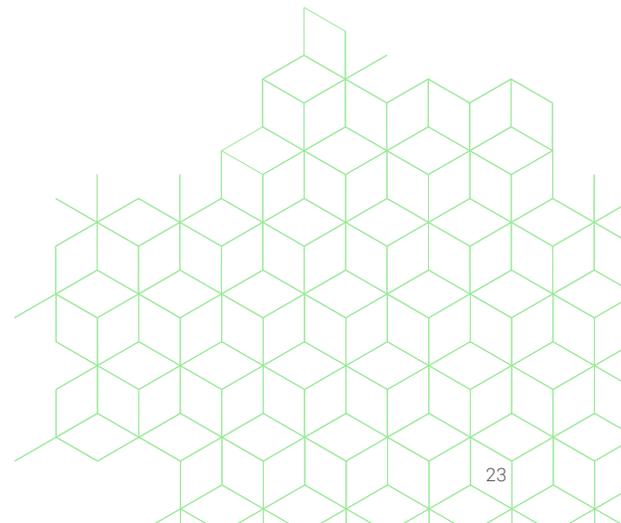



Vers la vidéo du produit

# DAILY

Les orthèses brutes DAILY constituent la base de notre gamme DAILY. La coquille fine autoportante Perpedes en composite de fibre de verre, avec sa longue section latérale, soutient de manière optimale la voûte longitudinale du pied et guide le talon tout en maintenant une impression naturelle durant la marche. La coquille Perpedes en composite de fibre de verre, disponible en deux largeurs, peut être façonnée, si besoin, grâce à ses propriétés thermoplastiques et peut ainsi être adaptée de manière unique

au pied et aux problèmes de l'utilisateur. Une couche textile de renforcement avec des éléments de stabilisation de l'avant-pied confère une stabilité supplémentaire à l'orthèse brute, alors que la souple et fine zone de rembourrage grise offre un confort supplémentaire. Il est également possible d'ajouter au DAILY des coussinets remplis de mousse souple CarboSan qui soutiendront la voûte transversale.



DAILY  
DAB\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien  
Coussin souple pour semelle longue

Compatible avec le

**BALANCER - MODULE DE TALON**



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles:	35 - 48
Largeur:	Étroite (35 - 43)
	Moyenne (38 - 48)
Coquille pour orthèse plantaire:	Matériau composite acrylique en fibre de verre maillée (G431)
Silhouette:	Business
Silhouette 3D:	DA = soutien modéré de la voûte latérale avec talon légèrement guidé
Caractéristique spéciale:	Côtés longs
	Coussinet souple dans la zone

## DAILY

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	AJOUT	LARGEUR	LONGUEUR	TAILLES
DAE_	CarboTec noir	COMFORT coussinet souple dans la zone	Étroite	4/4	35 - 43
DAB_	CarboTec titane	COMFORT coussinet souple dans la zone	Moyenne	4/4	38 - 48



# DAILY HIGH HEEL

L'orthèse brute DAILY HIGH HEEL est spécialement conçue pour être utilisée dans des chaussures à haut talon. La coquille fine, auto-portante et hautement flexible Perpedes en composite de fibre de carbone, avec sa petite section latérale, s'adapte de manière optimale au talon de la chaussure. La coquille fine en fibre de carbone, disponible en deux largeurs, peut être façonnée, si besoin, grâce à ses propriétés thermoplastiques et peut ainsi

être adaptée de manière unique au pied et aux besoins de l'utilisateur. De plus, des coussinets souples Carbosan pour l'avant-pied et le talon sont insérés pour réduire la sensation d'impact spécifique lors du port de talons hauts. Il est également possible d'ajouter au DAILY HIGH HEEL des coussinets remplis de mousse souple Carbosan, qui soutiendront la voûte transversale.



DAILY HIGH HEEL  
DHA\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien

Compatible avec le  
**BALANCER - MODULE DE TALON**



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles:	36 - 43
Largeur:	Étroite
Coquille pour orthèse plantaire:	Matériau composite acrylique en fibre de verre maillée (C601)
Silhouette:	Business
Silhouette 3D:	DH = soutien modéré de la voûte latérale, talon plat
Caractéristique spéciale:	Coussinet en mousse Carbosan pour l'avant-pied et le talon Côtés courts

## DAILY HIGH HEEL

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	AJOUT	LARGEUR	LONGUEUR	TAILLES
DHA_	CarboTec noir	COMFORT Coussinets de confort souples pour avant-pied	Étroite	4/4	36 - 43



Vers la vidéo du produit

# DAILY RIGIDUS

L'orthèse brute DAILY RIGIDUS est conçue spécialement pour les problèmes dans la zone du gros orteil, notamment l'hallux limitus. La coquille auto-portante mais fine Perpedes en composite de fibre de verre, avec sa courte section latérale, soutient de manière dynamique la voûte longitudinale du pied et elle est prolongée sous l'articulation MTP 1 de telle sorte que l'articulation évite les déflexions douloureuses en mouvement lors de la marche. La section latérale courte de la coquille garantit une sensation de

démarche naturelle, alors que la zone de coussinets gris souples offre un confort supplémentaire. La coquille en composite de fibre de verre, disponible en deux largeurs, peut être façonnée, si besoin, grâce à ses propriétés thermoplastiques et peut ainsi être adaptée de manière unique au pied et aux besoins de l'utilisateur. On peut aussi ajouter au DAILY RIGIDUS des coussinets remplis de mousse souple Carbosan qui soutiendront la voûte transversale.



DAILY RIGIDUS  
DRB\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien  
Attelle rigide  
Coussin souple pour semelle longue

Compatible avec le  
**BALANCER - MODULE DE TALON**



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles: 35 - 48  
Largeur: Étroite (35 - 43) / Moyenne (38 - 48)  
Coquille pour orthèse plantaire: Matériau acrylique composite fait de fibre de verre et polyamide maillé (GH702)  
Silhouette: Business, Carrée  
Silhouette 3D: DR = soutien modéré de la voûte latérale avec talon guidé  
Caractéristique spéciale: Côtés courts  
Coussinet souple dans la zone

## DAILY RIGIDUS

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	AJOUT	LARGEUR	SILHOUETTE	LONGUEUR	TAILLES
DRE_	CarboTec noir	COMFORT coussinet souple dans la zone	Étroite	Business	4/4	35 - 43
DRB_	CarboTec titane	COMFORT coussinet souple dans la zone	Moyenne	Business	4/4	38 - 48








## SOLEUTION

La gamme SOLEUTION est idéale pour traiter des symptômes cliniques complexes. SOLEUTION SUPPORT, SOLEUTION PRO et SOLEUTION PAPILLON offrent toujours une option thérapeutique adaptée grâce à leur alignement indicatif. Il existe une largeur unisexe, la section du talon du pied n'est pas affectée par la coque orthétique. La pièce principale de la gamme SOLEUTION est la coquille orthopédique en matériau composite de fibre de verre que nous avons développée nous-mêmes. En raison de leurs propriétés thermoplastiques, les coquilles peuvent être personnalisées pour s'adapter au pied facilement et rapidement. Afin de remplir les exigences de qualité très élevées de Perpedes, seuls des matériaux sélectionnés et certifiés, qui s'accordent parfaitement entre eux, sont utilisés pour la gamme SOLEUTION.

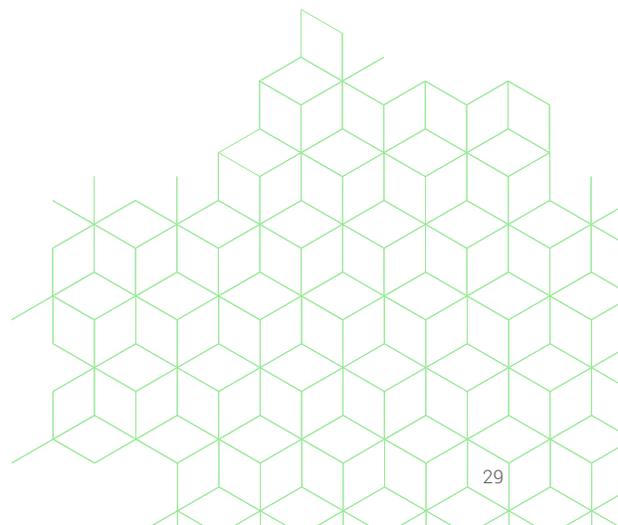



Vers la vidéo du produit

# SOLEUTION SUPPORT

L'orthèse brute SOLEUTION SUPPORT est spécialement conçue pour les personnes souffrant de problèmes de pied liés à un affaissement des voûtes longitudinales du pied. La coquille composite en fibre de verre auto-portante Perpedes, avec ses zones de talon fines et flexibles, soutient de manière dynamique la voûte grâce à la couche de fibre de carbone ajoutée et combat ainsi les problèmes de surpronation. La coquille en fibre de verre est dispo-

nible dans une hauteur de voûte adaptée et peut être façonnée au besoin grâce à ses propriétés thermoplastiques. Elle peut ainsi être adaptée de manière unique au pied et aux besoins de l'utilisateur. On peut aussi couper ou poncer, pour la rendre plus étroite, la SOLEUTION SUPPORT ou y ajouter des coussinets remplis de mousse souple Carbosan, qui soutiendront la voûte transversale.



SOLEUTION SUPPORT  
SSE\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien  
Cale de supination

Compatible avec le  
BALANCER - MODULE DE TALON



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles: 35 - 48  
 Largeur: Moyenne  
 Coquille pour orthèse plantaire: Matériau acrylique composite fait de fibre de verre et polyamide maillé (GH702)  
 Silhouette: Carrée, Natural silhouette  
 Silhouette 3D: SH = soutien élevé de la voûte latérale avec talon guidé  
 Caractéristique spéciale: Soutien de la voûte supplémentaire en matériau de fibre de carbone (C901)  
 Zone de talon sans coquille

## SOLEUTION SUPPORT

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	LARGEUR	SILHOUETTE	SILHOUETTE 3D	LONGUEUR	TAILLES
SSE_	CarboTec titane	Moyenne	Carrée	SH	4/4	35 - 48



# SOLEUTION PRO

L'orthèse brute SOLEUTION PRO est conçue pour les problèmes de démarche en supination. La coquille auto-portante en fibre de verre Perpedes peut être re-moulée thermiquement et elle est disponible avec une hauteur de voûte adaptée. Avec sa zone de talon fine et flexible, elle garantit un contact naturel du pied avec le sol. Quand on utilise une cale de pronation au milieu du pied/à l'avant-pied, la portion latérale du pied est surélevée. Cela

permet de résoudre les problèmes qui surviennent en raison de la surcharge, et également les problèmes d'articulation du genou. On peut aussi couper ou raboter de manière plus fortement la SOLEUTION PRO pour la rendre plus étroite, ou y ajouter des coussinets remplis de mousse souple Carbosan qui soutiendront la voûte transversale.



SOLEUTION PRO  
SOE\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien  
Cale de pronation

Compatible avec le  
**BALANCER - MODULE DE TALON**



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles: 35 - 48  
 Largeur: Moyenne  
 Coquille pour orthèse plantaire: Matériau acrylique composite fait de fibre de verre et polyamide maillé (GH702)  
 Silhouette: Carrée, Natural silhouette  
 Silhouette 3D: SH = soutien élevé de la voûte latérale avec talon guidé  
 Caractéristique spéciale: Cale de pronation ajoutée en matériaux de fibre de carbone (C901)  
 Zone de talon sans coquille

## SOLEUTION PRO

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	LARGEUR	SILHOUETTE	SILHOUETTE 3D	LONGUEUR	TAILLES
SOE_	CarboTec titane	Moyenne	Carrée	SH	4/4	35 - 48



Vers la vidéo du produit

# SOLEUTION PAPILLON

L'orthèse brute SOLEUTION PAPILLON est spécialement conçue pour être utilisée en cas de problèmes avancés à l'avant-pied. Les zones nettement plus stables qui forment des ponts en liège thermique au centre et sur les côtés de l'avant-pied pour soulager les articulations MTP centrales. Le Shock Absorber X de haute qualité (mousse PUR) minimise encore la sensation de pression. La coquille composite auto-portante en fibre de verre Perpedes, avec son renfort central et son talon fin et flexible, soutient la

voûte longitudinale du pied. La coquille orthopédique, disponible en deux largeurs, peut être façonnée, au besoin, grâce à ses propriétés thermoplastiques, et peut ainsi être adaptée de manière unique au pied et aux besoins de l'utilisateur. On peut aussi couper ou raboter plus fortement la SOLEUTION PAPILLON pour la rendre plus étroite, ou y ajouter des coussinets remplis de mousse souple Carbosan, qui soutiendront la voûte transversale.



SOLEUTION PAPILLON  
SAE\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien  
Cale de supination  
Coussin souple pour l'avant pied

Compatible avec le  
**BALANCER - MODULE DE TALON**



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles: 35 - 48  
Largeur: Moyenne  
Coquille pour orthèse plantaire: Matériau acrylique composite fait de fibre de verre et polyamide maillé (GH702)  
Silhouette: Carrée, Natural silhouette  
Silhouette 3D: SH = soutien élevé de la voûte latérale avec talon guidé  
Caractéristique spéciale: Coussinet d'avant-pied en matériau Shock Absorber X PUR  
Soulagement pour les articulations MTP

## SOLEUTION PAPILLON

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	LARGEUR	SILHOUETTE	SILHOUETTE 3D	LONGUEUR	TAILLES
SAE_	CarboTec titane	Moyenne	Carrée	SH	4/4	35 - 48








# CALCA

La gamme CALCA combine un soulagement efficace de la pression dans la zone du talon avec un soutien longitudinal de la voûte. Parfaits pour traiter les problèmes de talon fréquents et douloureux, le CALCA PRO X et le CALCA PRO X XL offrent un soin optimal pour marcher sans douleur. La pièce principale de la gamme CALCA est la coquille orthopédique en matériau composite de fibre de verre développée et produite par Perpedes elle-même. En raison de leurs propriétés thermoplastiques, les coquilles peuvent être personnalisées facilement et de manière unique. Le soulagement du talon offert par la coquille orthopédique est concentré sur l'emplacement anatomique du fascia plantaire et parcourt la voûte longitudinale du pied. Cela soulage les structures plantaires et favorise une progression thérapeutique. Seuls des matériaux de grande qualité, qui répondent aux exigences de qualité de Perpedes, sont utilisés pour la gamme CALCA. Les composantes orthopédiques du pied correspondent parfaitement les unes aux autres.

CALCA PRO X  
Page 37

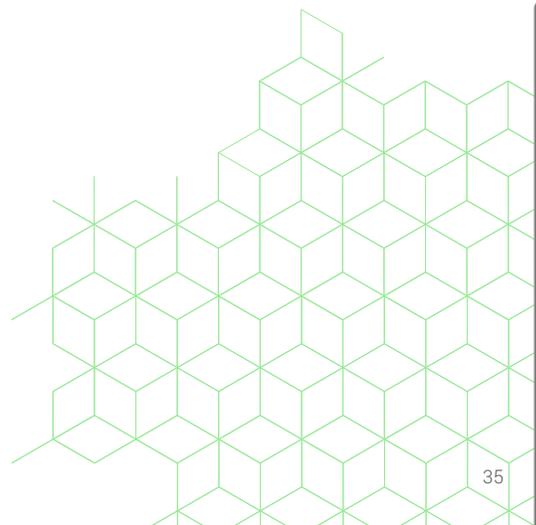



Vers la vidéo du produit

# CALCA PRO X

L'orthèse brute CALCA PRO X est l'orthèse originale. Elle est conçue en particulier pour les douleurs causées par la surcharge dans la zone du talon. La cavité du talon de la coquille auto-portante Perpedes, en composite de fibre de verre, en combinaison avec sa cavité basse unique pour le fascia plantaire, se concentre sur l'emplacement anatomique du fascia et parcourt la voûte longitudinale du pied. Le soutien modéré de la voûte et la double couche de coussinet Shock Absorber X de l'arrière-pied, en combi-

naison avec la mousse PUR Slow Memory, réduisent de manière optimale les forces d'impact qui affectent le talon à chaque pas. La coquille orthopédique, disponible en deux largeurs, peut être façonnée, au besoin, grâce à ses propriétés thermoplastiques, et peut ainsi être adaptée de manière unique au pied et aux besoins de l'utilisateur. On peut aussi ajouter au CALCA PRO X des coussinets remplis de mousse souple Carbosan, qui soutiendront la voûte transversale.



CALCA PRO X  
CPE\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien  
Cavité et coussin pour épine calcanéale

Compatible avec le  
**BALANCER - MODULE DE TALON**



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles: 35 - 48  
 Largeur: Moyenne  
 Coquille pour orthèse plantaire: Matériau acrylique composite fait de fibre de verre et polyamide maillé (GH702)  
 Silhouette: Carrée  
 Silhouette 3D: PX = soutien modéré de la voûte latérale avec cavité du fascia plantaire dans la coquille  
 Caractéristique spéciale: Cavité anatomiquement correcte pour la fasciite plantaire/l'épine calcanéenne avec cavité pour le fascia pour un soulagement maximal

## CALCA PRO X

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	COUSSINETS POUR L'ARRIÈRE-PIED	LARGEUR	LONGUEUR	TAILLES
CPE_	CarboTec noir	2 x 3 mm Shock Absorber X 7° Shore A, jaune	Moyenne	4/4	35 - 48



# CALCA PRO X GREEN EDITION

L'orthèse brute CALCA PRO X « Green Edition » est basée sur l'orthèse originale CALCA PRO X, mais est fournie avec une mousse 12° Shore A PUR Memory verte 5 mm, à cellules ouvertes, dans la zone du talon - pour tous les problèmes qui demandent un rembourrage souple supplémentaire et un effet de soulagement de l'impact. La cavité de talon de la coquille auto-portante en fibre de verre, en combinaison avec sa cavité unique qui soulage le fascia plantaire, se concentre sur l'emplacement anatomique du fascia et parcourt la voûte longitudinale du pied. Le soutien

modéré de la voûte combat le mauvais alignement de l'arrière-pied et aide à rétablir une charge plantaire physiologiquement correcte. La coquille orthopédique, disponible en deux largeurs, peut être façonnée, au besoin, grâce à ses propriétés thermoplastiques et peut ainsi être adaptée de manière unique au pied et aux besoins de l'utilisateur. On peut aussi ajouter au CALCA PRO X des coussinets remplis de mousse souple Carbosan, qui soutiendront la voûte transversale.



CALCA PRO X GREEN EDITION  
CGA\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien  
Cavité et coussin pour épine calcanéale

Compatible avec le  
**BALANCER - MODULE DE TALON**



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles:	35 - 48
Largeur:	Moyenne
Coquille pour orthèse plantaire:	Matériau acrylique composite fait de fibre de verre et polyamide maillé (GH702)
Silhouette:	Carrée
Silhouette 3D:	PX = soutien modéré de la voûte latérale avec cavité du fascia plantaire dans la coquille
Caractéristique spéciale:	Coussinets pour l'arrière-pied, épaisseur totale 8mm Cavité anatomiquement correcte pour la fasciite plantaire/l'épine calcanéenne avec cavité pour le fascia pour un soulagement maximal

## CALCA PRO X GREEN EDITION

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	COUSSINETS POUR L'ARRIÈRE-PIED	LARGEUR	LONGUEUR	TAILLES
CGA_ GREEN EDITION	CarboTec noir	5 mm PUR Memory 12° Shore A, vert 3 mm PUR Memory 7° Shore A, jaune	Moyenne	4/4	35 - 48



Vers la vidéo du produit

# CALCA PRO X XL

L'orthèse brute CALCA PRO X XL est particulièrement adaptée aux patients plus lourds avec de grands pieds larges et des problèmes douloureux dans la zone du talon, notamment des fasciites plantaires ou des épines calcanéennes. La cavité de talon façonnée de manière anatomique, en combinaison avec la cavité de la coquille pour le fascia plantaire, correspond au Calca Pro X, qui connaît du succès depuis de nombreuses années. Une coquille en fibre de verre Perpedes plus large de 6 mm, plus épaisse et donc plus stable, est utilisée pour la version XL. Le coussinet PUR Medical résistant dans le temps et la mousse intégrée-

PUR Slow Memory entourent délicatement le fascia plantaire et distribuent ainsi la charge du corps de manière optimale dans l'arrière pied. Cela garantit un soulagement rapide de la douleur et peut aider à prévenir des symptômes chroniques. La coquille orthopédique, disponible en deux largeurs, peut être façonnée comme d'habitude, au besoin, grâce à ses propriétés thermoplastiques, et peut ainsi être adaptée de manière unique au pied et aux besoins de l'utilisateur. On peut aussi ajouter au CALCA PRO X XL des coussinets remplis de mousse souple Carbosan, qui soutiendront la voûte transversale.



CALCA PRO X XL  
CXL\_

## CARACTÉRISTIQUES

Orthèse plantaire brute pour le soutien  
Cavité et coussin pour épine calcanéale

Compatible avec le  
**BALANCER - MODULE DE TALON**



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles: 40 - 48  
 Largeur: Large  
 Coquille pour orthèse plantaire: Matériau composite acrylique en fibre de verre maillée (G422)  
 Silhouette: Carrée  
 Silhouette 3D: PX = soutien modéré de la voûte latérale avec cavité du fascia plantaire dans la coquille  
 Caractéristique spéciale: Coussinets pour l'arrière-pied, épaisseur totale 6mm  
 Cavité anatomiquement correcte pour la fasciite plantaire/l'épine calcanéenne avec cavité pour le fascia pour un soulagement maximal  
 Coquille orthopédique de pied élargie et renforcée

## CALCA PRO X XL

ARTICLE N°	REVÊTEMENT DE BASE	COUSSINETS POUR L'ARRIÈRE-PIED	LARGEUR	LONGUEUR	TAILLES
CXL_	CarboTec noir	2 x 3 mm PUR Medical 12° Shore A, beige	Large	4/4	40 - 48








# MATÉRIAUX



# REVÊTEMENTS SUPÉRIEURS

# DRYFEET LISSE

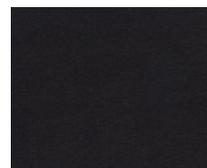

81DF80

## COMPOSITION DES MATÉRIAUX

66% PA / 5% PUR / 29% PES

## CARACTÉRISTIQUES

Très haute résistance à l'abrasion

Respirant

Anti-bactérien, anti-microbien, anti-odeur

Forte résistance à la couture

Très bonne absorption et élimination de l'humidité

Aspect et sensation cuir

Très bonne résistance au déchirement et à la force de traction

ARTICLE N°	COULEUR	TEXTURE	ÉPAISSEUR
81DF8012	noir	lisse	0.8 mm 

## TRAITEMENT


Peut facilement être collé, coupé et raboté

## FORME DE LIVRAISON

Disponible en mini rouleau (largeur approx. 12 cm) appr. 50 rmt 

Disponible en combinaison de couche supérieure (voir page 58)

# DRYFEET MICROPERFORÉE

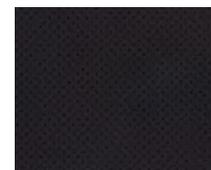

81DF80N

## COMPOSITION DES MATÉRIAUX

66% PA / 5% PUR / 29% PES

## CARACTÉRISTIQUES

Très haute résistance à l'abrasion

Respirant

Anti-bactérien, anti-microbien, anti-odeur

Piquage pour un look sportif

Très bonne absorption et élimination de l'humidité

Aspect et sensation cuir

Très bonne résistance au déchirement et à la force de traction

ARTICLE N°	COULEUR	TEXTURE	ÉPAISSEUR
81DF80N12	noir	microperforée	0.8 mm 

## TRAITEMENT

Peut facilement être collé, coupé et raboté

## FORME DE LIVRAISON


Disponible en mini rouleau (largeur approx. 12 cm) appr. 50 rmt 

Disponible en combinaison de couche supérieure (voir page 58)



# COMBINAISONS POUR COUCHE SUPÉRIEURE

# DRYFEET+

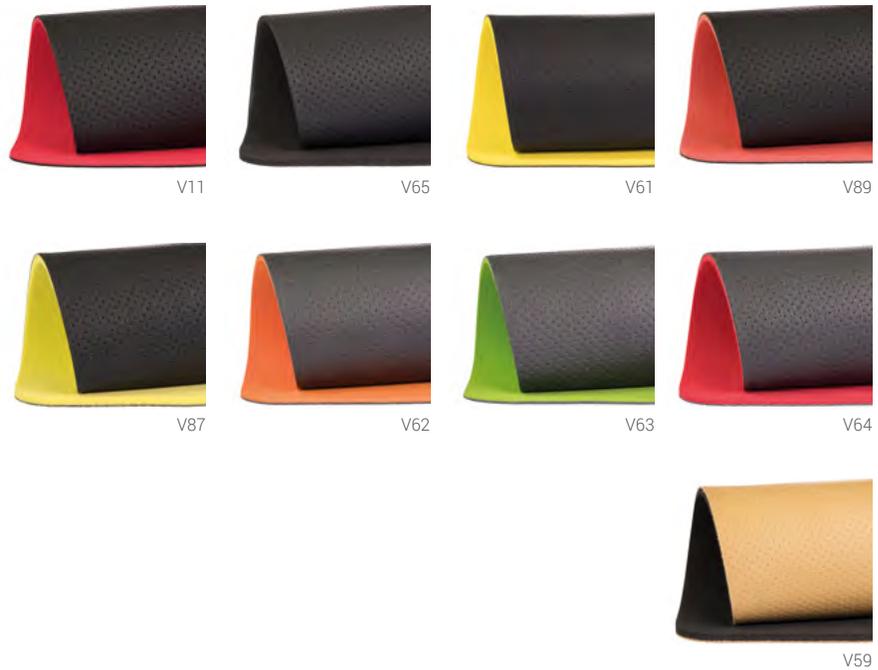

## FORME DE LIVRAISON

Disponible sous forme de feuille

ARTICLE N°	COUCHE DE REVÊTEMENT SUPÉRIEURE	COUCHE DE REVÊTEMENT DE BASE	ÉPAISSEUR	DIMENSION DE LA FEUILLE
V11	DryFeet noir, microperforée, 0,8 mm	EVA PLUS rouge, 20° Shore A, 2,0 mm	2,8 mm	80 x 120 cm
V65	DryFeet noir, microperforée, 0,8 mm	EVA noir, 20° Shore A, 2,0 mm	2,8 mm	100 x 210 cm
V61	DryFeet noir, microperforée, 0,8 mm	EVA jaune, 35° Shore A, 3,0 mm	3,8 mm	100 x 210 cm
V89	DryFeet noir, microperforée, 0,8 mm	PUR Slow Memory rouge, 12° Shore A, 2,5 mm	3,3 mm	137 x 150 cm
V87	DryFeet noir, microperforée, 0,8 mm	PUR Shock Absorber X jaune, 7° Shore A, 3,0 mm	3,8 mm	140 x 150 cm
V62	DryFeet anthracite, microperforée, 0,8 mm	EVA PLUS orange, 20° Shore A, 2,0 mm	2,8 mm	80 x 120 cm
V63	DryFeet anthracite, microperforée, 0,8 mm	EVA PLUS vert, 20° Shore A, 2,0 mm	2,8 mm	80 x 120 cm
V64	DryFeet anthracite, microperforée, 0,8 mm	EVA PLUS rouge, 20° Shore A, 3,0 mm	3,8 mm	80 x 120 cm
V59	DryFeet beige, microperforée, 0,8 mm	EVA noir, 20° Shore A, 3,0 mm	3,8 mm	100 x 210 cm





3 R

C

MADE IN GERMANY



3 R

L

L

L

MADE IN GERMANY



# ACCESSOIRES



BALANCER



Vers la vidéo de traitement

# BALANCER - MODULE DE TALON

Le BALANCER constitue la solution idéale pour ajouter rapidement un talon ou une plateforme à une orthèse plantaire de type habillage. Une fois collée sur la coque de l'orthèse, il doit être raboté uniformément, à la fois au milieu et sur les côtés de manière uniforme, pour obtenir une position neutre. Par souci de simplicité, le BALANCER a été équipé de repères médians et latéraux. La limite supérieure du repère inférieur correspond à une réduction de 2 mm, et la limite supérieure du repère supérieur correspond à

une réduction de 4 mm. Le BALANCER peut aussi être utilisé pour compenser des inégalités de longueur des membres inférieurs. Les positions d'éversion ou d'inversion influencent la position du talon et du bas de la jambe et aident à réaligner les positions pathologiques des articulations du pied/de la cheville/du genou/de la hanche. Les repères médians et latéraux du BALANCER permettent d'obtenir une correction précise.



## INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT

Tailles: (35) 36 - 47 (48)  
Poids: 20g / unit  
Matériau: Polyuréthane thermoplastique (TPU)

IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LE BALANCER AVEC LES CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES PERPEDES SUIVANTES:



GAMME DAILY  
GAMME SOLEUTION

GAMME CALCA  
GAMME ACRYLIC (101, 115)

## BALANCER - MODULE DE TALON

	ARTICLE N°	DESCRIPTION	TAILLES	UNITÉ DE VENTE
BALANCER Module de talon, TPU, 10 Pairs	SH6010	BALANCER - MODULE DE TALON	36 - 38*	10 paires
BALANCER Module de talon, TPU, 50 Pairs	SH6050	BALANCER - MODULE DE TALON	36 - 38*	50 paires
BALANCER Module de talon, TPU, 10 Pairs	SH6110	BALANCER - MODULE DE TALON	39 - 41	10 paires
BALANCER Module de talon, TPU, 50 Pairs	SH6150	BALANCER - MODULE DE TALON	39 - 41	50 paires
BALANCER Module de talon, TPU, 10 Pairs	SH6210	BALANCER - MODULE DE TALON	42 - 44	10 paires
BALANCER Module de talon, TPU, 50 Pairs	SH6250	BALANCER - MODULE DE TALON	42 - 44	50 paires
BALANCER Module de talon, TPU, 10 Pairs	SH6310	BALANCER - MODULE DE TALON	45 - 47**	10 paires
BALANCER Module de talon, TPU, 50 Pairs	SH6350	BALANCER - MODULE DE TALON	45 - 47**	50 paires

\* applicable à partir de la taille 35 \*\* applicable aussi jusqu'à la taille 48

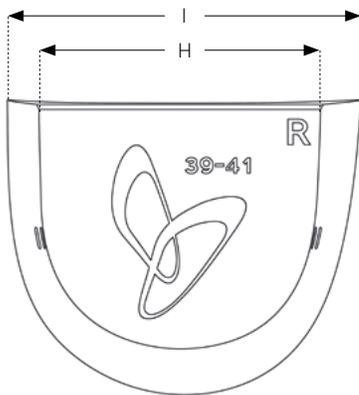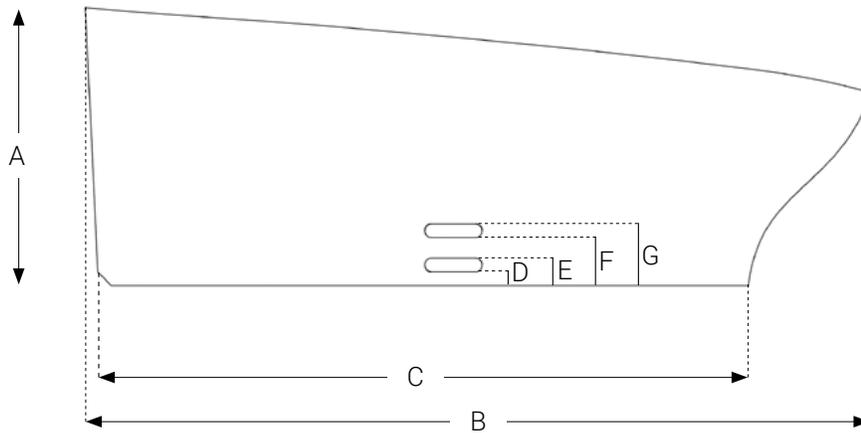

## DIMENSIONS

en mm	SH60	SH61	SH62	SH63
A hauteur du BALANCER	20	20	20	20
B longueur du BALANCER	53	57	61	65
C longueur de la base	43	47	51	55
D repère inférieur bas	1	1	1	1
E repère inférieur haut	2	2	2	2
F repère supérieur bas	3	3	3	3
G repère supérieur haut	4	4	4	4
H largeur de la base	51	54	57	60
I largeur du BALANCER	64	68	72	76



## POSITION NEUTRE, INÉGALITÉ DE LONGUEUR DES MEMBRES INFÉRIEURS, DOULEURS AU TALON D'ACHILLE

Le BALANCER est la solution parfaite pour créer rapidement une position et une plateforme neutres. Il faut le raboter uniformément, au milieu et sur les côtés de manière uniforme. Le BALANCER peut aussi être ajusté pour compenser des inégalités de longueur des membres inférieurs de max. 4 mm. Des talonnettes plus épaisses en matériau dense EVA peuvent être ajoutées à la plateforme rabotée et uniforme du BALANCER.



## POSITION D'ÉVERSION/D'INVERSION, DÉFORMATIONS VARUS/VALGUS DU TALON, DÉFORMATIONS (ARTHROSE) DES ARTICULATIONS DE LA CHEVILLE, DU GENOU ET DE LA HANCHE


Grâce au BALANCER, la position du talon est réalignée de sorte que d'éventuelles mauvaises positions des articulations du pied/de la cheville/du genou/de la hanche peuvent être corrigées. Pour cela, le BALANCER doit être raboté plus fortement au niveau médian ou latéral (selon le résultat souhaité) que sur le côté opposé. Les repères médians et latéraux du produit permettent d'obtenir ce résultat. Voir le tableau « DIMENSIONS » pour plus de détails.



# COUSSINETS

# COUSSINETS POUR MÉTATARSES


## FORME DE GOUTTE

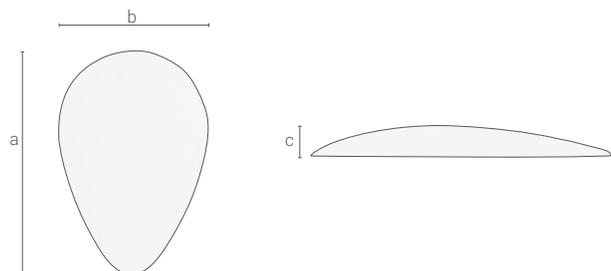

ARTICLE N°	TAILLES	LONGUEUR (a)	LARGEUR (b)	HAUTEUR (c)
P20321	1	61 mm	40 mm	7 mm
P20322	2	66 mm	44 mm	8 mm


2032 en mousse de Carbosan

## FORME ANATOMIQUE

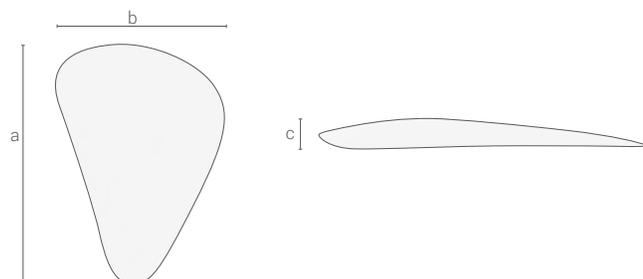


ARTICLE N°	TAILLES	LONGUEUR (a)	LARGEUR (b)	HAUTEUR (c)
P66481	1	63 mm	45 mm	7 mm
P66482	2	70 mm	50 mm	7 mm
P66483	3	76 mm	54 mm	8 mm

6648 en mousse de Carbosan

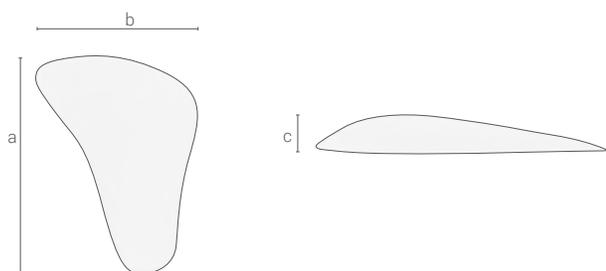

ARTICLE N°	TAILLES	LONGUEUR (a)	LARGEUR (b)	HAUTEUR (c)
P74431	1	65 mm	47 mm	8 mm
P74432	2	68 mm	49 mm	11 mm
P74433	3	75 mm	53 mm	12 mm
P74434	4	83 mm	59 mm	13 mm

7443 en mousse de Carbosan

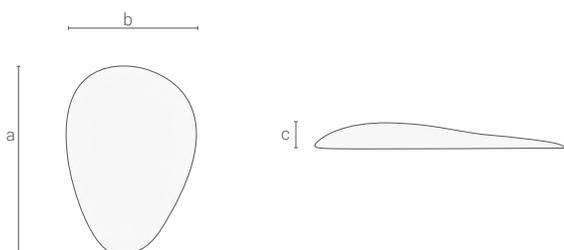

ARTICLE N°	SIZE	LONGUEUR (a)	LARGEUR (b)	HEIGHT (c)
P34151	1	52 mm	35 mm	5 mm
P34152	2	58 mm	40 mm	6 mm
P34153	3	65 mm	45 mm	7 mm
P34154	4	70 mm	50 mm	8 mm

3415 en mousse de Carbosan

# COUSSINETS POUR MÉTATARSES

## FORME DE GOUTTE

	ARTICLE N°	TAILLES	LONGUEUR (A)	LARGEUR (B)	HAUTEUR (C)	UNITÉ DE VENTE
20321, Coussinet pour métatarse, forme de goutte, Carbosan, 10 paires	P2032110	1	61 mm	40 mm	7 mm	10 paires
20321, Coussinet pour métatarse, forme de goutte, Carbosan, 10 paires	P2032210	2	70 mm	50 mm	7 mm	10 paires

## FORME ANATOMIQUE

	ARTICLE N°	TAILLES	LONGUEUR (A)	LARGEUR (B)	HAUTEUR (C)	UNITÉ DE VENTE
6648, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P6648110	1	76 mm	54 mm	8 mm	10 paires
6648, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P6648210	2	61 mm	40 mm	7 mm	10 paires
6648, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P6648310	3	61 mm	40 mm	7 mm	10 paires
7443, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P7443110	1	65 mm	47 mm	8 mm	10 paires
7443, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P7443210	2	68 mm	49 mm	11 mm	10 paires
7443, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P7443310	3	75 mm	53 mm	12 mm	10 paires
7443, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P7443410	4	83 mm	59 mm	13 mm	10 paires
3145, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P3415110	1	52 mm	35 mm	5 mm	10 paires
3415, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P3415210	2	58 mm	40 mm	6 mm	10 paires
3415, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P3415310	3	65 mm	45 mm	7 mm	10 paires
3415, Coussinet pour métatarse, forme anatomique, Carbosan, 10 paires	P3415410	4	70 mm	50 mm	8 mm	10 paires

## CONDITIONS GÉNÉRALES & CONDITIONS DE VENTE, DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT

### 1. LIMITES

Les conditions de vente ci-après s'appliquent exclusivement. Les conditions d'achat dérogatoires ou contraires à nos conditions de vente ne s'appliquent que si nous les avons expressément approuvées par écrit. En passant commande, l'acheteur accepte également les présentes conditions pour de futures transactions commerciales.

### 2. OFFRE

Nos offres sont susceptibles de changer et sont non-contraignantes.

### 3. COMMANDES

Les commandes ne sont pas considérées comme acceptées tant qu'une confirmation écrite n'a pas été envoyée ou qu'une facture n'a pas été émise. Nos conditions de livraison et de paiement sont valables pendant toute la durée de la relation commerciale. Les conditions de l'acheteur dérogatoires ou contraires à nos conditions ne s'appliquent que si nous les avons expressément approuvées par écrit.

### 4. DROIT DE RÉTRACTATION

La solvabilité indiscutable de l'acheteur est une condition préalable à la livraison. Si le vendeur, après la conclusion du contrat, prend connaissance de circonstances qui, à son avis, mettent en doute la solvabilité de l'acheteur à hauteur de la valeur du contrat, notamment en cas de dégradation significative de la situation financière de l'acheteur, de suspension de paiement, de liquidation, de cessation des activités, de dépôt de bilan, de mesures exécutoires ou de protestations de chèque ou de traite, en cas de transfert d'entreprise ou de circonstances similaires, ou si l'acheteur met en gage ses actions, créances ou marchandises achetées pour garantir d'autres créanciers ou ne paie pas les factures dues malgré un rappel, ou si les ordres de domiciliation ne peuvent être remboursés ou si une assurance-crédit de l'acheteur est refusée et/ou résiliée, le vendeur est autorisé à exiger des paiements anticipés ou des garanties, ou à annuler le contrat. Les délais de livraison convenus sont considérés comme suspendus à compter de ce moment précis.

### 5. PRIX

Nos prix de vente sont des prix nets. Ils sont sujets à modification et s'entendent départ usine, hors TVA. La publication de ces tarifs invalide toutes les éditions précédentes.

### 6. LIVRAISON, ASSURANCE TRANSPORT

Les délais de livraison que nous indiquons sont approximatifs et sans engagement. Des livraisons partielles sont possibles. Toutes les livraisons, y compris les livraisons partielles, sont aux risques et périls de l'acheteur. Cela s'applique également aux livraisons sans frais d'expédition. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage ou de perte pendant le transport.

Une assurance d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 \$ CA est conclue automatiquement avec le contrat de consignation. Pour des valeurs d'ordre supérieur, il appartient au client de souscrire une assurance rémunérée. Tout retard ou obstacle à la livraison, non causé par nous, nous libère de l'obligation de livraison, sans donner lieu à des droits ou réclamations de la part de l'acheteur à notre encontre. La commande minimum s'élève à 75 \$ CA nets ! Pour les petites commandes inférieures à ce montant, un supplément petites commandes de 10 \$ CA sera facturé.

### 7. FORMATION - COURS

Si l'intervenant a un empêchement ou si le nombre minimum de participants n'est pas atteint, nous nous réservons le droit d'annuler l'événement jusqu'à 10 jours avant la date de celui-ci. Les participants seront, dans ce cas, immédiatement avertis, et les frais de cours déjà payés seront remboursés. Toute autre réclamation est exclue.

### 8. EXPÉDITION, ÉLIMINATION DES EMBALLAGES

L'emballage sera facturé au prix coûtant ! Sauf convention contraire, le mode d'expédition est le moins coûteux, à notre appréciation. Les frais d'expédition sont à la charge et aux risques de l'acheteur, même s'il n'assume pas les frais de transport. Toutes les commandes d'une valeur minimale de 1 500 \$ CA seront expédiées dans les provinces canadiennes sans frais d'expédition supplémentaires, à l'exception des frais supplémentaires s'appliquant à certaines circonstances géographiques (par ex. destinations insulaires) ou des frais express. D'autres exceptions s'appliquent aux envois volumineux (tels que les matériaux en rouleaux, les panneaux, etc.). Nous facturerons un supplément de 10 \$ CA pour toute commande d'une valeur nette de moins de 75 \$ CA. Il incombe à nos clients commerciaux et aux hôpitaux de se débarrasser des emballages à leurs propres frais.

### 9. CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos conditions de paiement s'appliquent dans notre boutique en ligne, sur les devis et les factures. Les paiements en tous genres proviennent de l'agent payeur du vendeur. C'est le moment où le compte du vendeur est crédité qui détermine si le paiement a été effectué à temps. L'acheteur supportera tous les frais d'escompte ainsi que les frais bancaires. Nous n'acceptons les remises que si toutes les obligations des livraisons précédentes ont été remplies. En cas de retard de paiement de plus de deux semaines, toutes les créances du vendeur deviennent immédiatement exigibles. En cas de retard de paiement, nous nous réservons le droit de facturer des frais de retard et, le cas échéant, des intérêts supérieurs au taux préférentiel. Nous faisons toujours appel à une agence de recouvrement au plus tard après le dernier rappel, ce qui entraîne des frais supplémentaires pour l'acheteur. Le vendeur n'est pas tenu d'effectuer d'autres livraisons dans le cadre d'un contrat en cours avant que toutes les factures impayées, y compris les intérêts moratoires et les frais de relance, aient été payés en totalité.

### 10. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Toutes les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à leur paiement intégral. La marchandise ne peut être ni mise en gage ni cédée en garantie tant qu'elle n'a pas été intégralement payée. Toute saisie par un tiers nous sera immédiatement notifiée. En cas de revente de la marchandise à des tiers, les créances résultant de cette revente seront en priorité transférées au vendeur pour le montant restant dû. Si les marchandises sont transformées ou mélangées à d'autres marchandises, la perte des droits sera compensée. Lors de la conclusion du contrat, l'acheteur cèdera déjà au vendeur ses droits relatifs à la nouvelle marchandise - le cas échéant, sa propriété partielle sur la marchandise transformée. La revendication d'un droit de retenue n'est pas considérée comme une rétractation du contrat. Les frais d'interventions et le retour de la marchandise sont à la charge de l'acheteur. Dans les pays étrangers, l'acheteur doit respecter les droits de réserve de propriété du vendeur. Les frais d'intervention et de retour de la marchandise sont à la charge de l'acheteur, sauf accord écrit de notre part. L'acheteur doit respecter les droits de réserve de propriété du vendeur. Tous les frais occasionnés par la reprise de la marchandise sous réserve de propriété sont à la charge de l'acheteur. Si nous faisons valoir notre demande de restitution, nous sommes en droit - nonobstant l'obligation de paiement de l'acheteur - de faire le meilleur usage possible de la marchandise reprise, y compris les accessoires, par le biais de la vente privée.

#### 11. GARANTIE

Tout défaut doit nous être signalé par écrit immédiatement après réception de la livraison. Dès réception, la livraison doit être inspectée pour s'assurer qu'elle est complète et qu'elle ne présente aucun dommage ou défaut visible. Nos obligations de garantie, en particulier, expirent si la marchandise livrée a été modifiée par des tiers ou utilisée avec des marchandises de tiers dans une combinaison que nous n'avons pas approuvée, à condition que le dommage puisse leur être directement attribué. Si la plainte est justifiée, nous vous fournirons, à notre discrétion, une pièce de rechange ou une note de crédit. Toute autre responsabilité pour vices ou droits à dommages et intérêts est exclue.

#### 12. RETOURS

Tout retour nécessite généralement notre approbation préalable. En cas de retour, l'acheteur doit nous fournir une preuve de réception de la marchandise. Il suffit d'indiquer le numéro et la date de la facture sous la forme d'une copie de la facture. Afin d'accorder à l'acheteur un crédit pour les marchandises retournées, ces dernières doivent être retournées dans un état vendable (jamais portées, non endommagées et non souillées) et inclure les étiquettes individuelles (modèle, taille, lot). Toute marchandise retournée 3 mois après la date de facturation ne peut plus être acceptée en échange d'un crédit ou être échangée. Tout échange de marchandises spécialement conçues est exclu. Cela s'applique aux marchandises spéciales, sauf accord écrit de notre part.

#### 13. DROITS DE DISTRIBUTION EXCLUSIFS

L'approbation écrite de notre direction est généralement requise pour obtenir des droits de distribution exclusifs et non exclusifs sur nos produits.

#### 14. CONFIDENTIALITÉ

L'acheteur consent à la collecte, au traitement et à l'utilisation de ses données personnelles, dans la mesure où elles concernent l'établissement, le contenu ou la modification d'un contrat conformément à la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) ainsi qu'à d'autres réglementations en matière de respect de la vie privée. Les clients de Perpedes donnent leur accord conformément à la LCAP, dans la mesure où cela est nécessaire pour le traitement ou l'exécution d'une commande ou d'un devis. Vos données seront traitées dans la plus stricte confidentialité et ne seront pas divulguées à des tiers. Pour le traitement complet de votre commande, nous coopérons avec des prestataires de services à qui nous fournissons certaines données (nom, prénom, rue) pour l'exécution du contrat. Il s'agit de prestataires de services qui livrent les commandes. Dans le cadre du traitement des factures, nous transmettons également les données à des tiers pour le traitement des paiements. Tous nos prestataires de services sont tenus d'utiliser les données exclusivement aux fins susmentionnées, et ne doivent en aucun cas les communiquer à des tiers.

#### 15. DISPOSITIONS FINALES, LIEU D'EXÉCUTION ET JURIDICTION COMPÉTENTE

Si l'une des dispositions des présentes conditions générales de vente était invalide ou le devenait en tout ou en partie, les autres dispositions n'en seraient pas affectées. Les parties conviennent par la présente d'une disposition valide qui reflète le plus fidèlement possible l'objet économique de la disposition invalide. Nous attirons votre attention sur le fait que nous traitons les données de l'acheteur reçues dans le cadre de la relation d'affaires conformément à la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), indépendamment du fait que ces données aient été reçues de l'acheteur lui-même ou de tiers. Tout accord de garantie est nul et non avenue, à moins que le vendeur ne l'ait expressément accepté par écrit. Toutes les relations juridiques entre les parties sont soumises au droit civil et commercial à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Toronto, janvier 2019

Le lieu d'exécution et la juridiction compétente pour les deux parties est l'ICDR Canada (Centre International de Résolution des Différends) en vertu du règlement d'arbitrage de l'Association canadienne d'arbitrage.



[WWW.PERPEDES.COM](http://WWW.PERPEDES.COM)

Conseils et assistance:  
Perpedes Canada Inc.  
480 University Ave, Suite 1500  
Toronto, ON M5G 1V2  
Canada  
[www.perpedes.com](http://www.perpedes.com)  
[info@perpedes.com](mailto:info@perpedes.com)

Adresse de retour:  
Distributors' Choice Inc.  
c/o Perpedes Canada Inc.  
7085 Tomken Road  
Mississauga, ON L5S 1R7  
Canada

20200601-FLY84\_V01

